

mlSERIE™

medlab
PRODUCTS


Sumatory hematologiczne

do zliczania komórek
krwi obwodowej
i szpiku kostnego

Wysokiej klasy urządzenia, proste w obsłudze, o kompaktowych wymiarach, ułatwiające zliczanie komórek podczas mikroskopowej oceny rozmazów, stanowią niezbędny element wyposażenia każdego laboratorium wykonującego tego typu badania.



Sumator hematologiczny jest urządzeniem pomocniczym przy mikroskopowym różnicowaniu komórek w ręcznie wykonywanych rozmazach krwi obwodowej i szpiku kostnego.

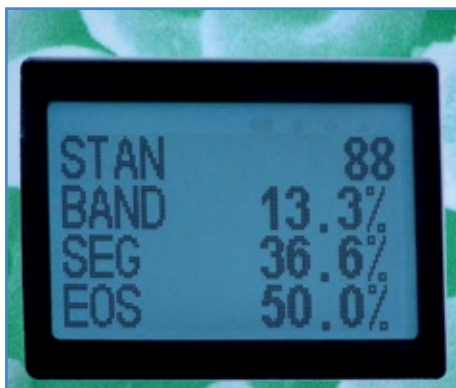

Sumator umożliwia wprowadzenie numeru porządkowego pacjenta wraz z datą wykonania badania oraz zliczenie i zapamiętanie do 1999 komórek lub innych elementów 12-stu lub 46-ściu typów, w zależności od rodzaju sumatora, a także wykonanie statystyki zliczenia.

Liczenie odbywa się poprzez wciskanie przycisków funkcyjnych odpowiadających zaobserwowanym komórkom w rozmazach krwi czy szpiku. Zliczenie każdego stu elementów sygnalizowane jest wydaniem dłuższego sygnału dźwiękowego.

Wbudowane złącze RS 232 umożliwia eksport zapisanych w pamięci sumatora danych do drukarki zewnętrznej (opcjonalna), komputera lub wewnętrznej sieci laboratoryjnej. W przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej sumator zachowuje w pamięci wyniki obliczeń, nawet do kilku dni.

Oferowane modele posiadają kompaktowe wymiary, dzięki czemu znajdzie się dla nich miejsce na każdym, nawet niewielkim stole laboratoryjnym.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:



Symbol katalogowy	A0-SH-0012-0	A0-SH-0024-0
Liczba przycisków funkcyjnych	12	24
Liczba typów zliczanych komórek	12	46
Przeznaczenie	krew obwodowa	krew obwodowa szpik kostny
Pamięć pomiarowa	240 wyników z 30 dni	80 wyników z 30 dni
Numeracja badań	1 - 9999	
Maksymalna liczba zliczanych komórek	1999	
Dokładność obliczeń statystycznych	0,1%	
Wyświetlacz	graficzny LCD	
Port komunikacyjny	RS 232	
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz	
Wymiary	235x140x75 mm	

Symbol katalogowy	Opis produktu	Opak. jedn. (szt.)
A0-SH-0012-0	Sumator hematologiczny SH-12, 12-parametrowy do krwi obwodowej posiadający 12 przycisków funkcyjnych	1
A0-SH-0024-0	Sumator hematologiczny SH-24, 46-parametrowy do krwi obwodowej i szpiku posiadający 24 przyciski funkcyjne	1
A0-SH-DRUK-TER	Drukarka termiczna zewnętrzna umożliwiająca wydruk wyników współpracująca z sumatorami A0-SH-0012-0 i A0-SH-0024-0	1

Zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy, a dostarczone produkty mogą posiadać niewielkie zmiany w wyglądzie i kolorystyce.

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.